

Z Herz- Thorax- Gefäßchir
<https://doi.org/10.1007/s00398-022-00491-0>
Eingegangen: 30. August 2021
Überarbeitet: 4. November 2021
Angenommen: 4. November 2021

© Der/die Autor(en) 2022



CARL – kontrollierte Reperfusion des ganzen Körpers

Von der kardiopulmonalen Reanimation zur zielgerichteten eCPR

C Benk · G Trummer · J.-S. Pooth · C. Scherer · F Beyersdorf

Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie, Universitätsklinikum Freiburg, Freiburg, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund: Inzidenz und Letalität des akuten Herz-Kreislauf-Stillstands sind seit Jahrzehnten gleichbleibend hoch.

Fragestellung: Wie lassen sich die derzeit unbefriedigenden Ergebnisse nach einer Reanimation mit Blick auf das Überleben und die neurologischen, v. a. mit Blick auf die zerebralen Folgeschäden verbessern?

Material und Methoden: Entwicklung eines therapeutischen Verfahrens zur Eindämmung des Ischämie-/Reperfusionsschadens im Tiermodell. Entwicklung eines für die Reanimation optimierten Gerätesystems, mit dem sich eine kontrollierte Ganzkörperreperfusion auch außerklinisch umsetzen lässt.

Ergebnisse: Etablierung der CARL-Therapie in der Klinik und in der Behandlung von OHCA-Patienten. Übernahme der Therapie und des CARL-Systems in eine klinische Beobachtungsstudie. Erste Fallberichte, in denen Patienten einen OHCA auch nach Ischämiezeiten bis zu 2 h ohne Schädigung des Gehirns überlebten.

Schlussfolgerungen: Die CARL-Therapie eignet sich potenziell zur Behandlung reanimationspflichtiger Patienten mit einem auch über längere Zeit therapierefrakären Herz-Kreislauf-Stillstand.

Schlüsselwörter

Reanimation · Reperfusion · CPR · Ischämie-/Reperfusionsschaden · Extrakorporale Zirkulation

Die CARL-Therapie (CARL: „controlled automated reperfusion of the whole body“) ist ein Verfahren zur Behandlung von Patienten, die kardiopulmonal reanimiert werden müssen. Sie adressiert spezifisch die pathophysiologischen Stoffwechselvorgänge, die nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand (HKS) unbehandelt zwangsläufig zum Tod bzw. im seltenen Überlebensfall häufig zu schweren neurologischen Schäden führen. Basis der neuen Methode ist eine zielgerichtete extrakorporale Reperfusion, in deren Verlauf die wichtigsten Vitalparameter des Patienten fortlaufend kontrolliert und angepasst werden. Der Organismus kann sich so zunächst schrittweise von der Mangel durchblutung erholen und lässt sich anschließend so lange stabilisieren, bis die Ursache des HKS behoben ist.

Krankheitsbild Herz-Kreislauf-Stillstand

Der akute HKS gehört nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Verschiedene Krankheitsbilder können zu einem therapierefrakären Atem- und/oder Herz-Kreislauf-Versagen führen. In den meisten Fällen ist der Auslöser eine kardiale Grunderkrankung, z.B. eine koronare Herzkrankheit, die in ihrem schwersten Verlauf einen akuten Myokardinfarkt mit Herzstillstand auslösen kann.

In Europa erleiden rund 500.000 Menschen/Jahr einen plötzlichen Herzstillstand, den außerklinisch („out-of-hospital cardiac arrest“, OHCA) nur etwa 8% und innerklinisch („in-hospital cardiac arrest“, IHCA) etwa 20% aller Betroffenen überleben [1]. Etwa die Hälfte der Überlebenden



QR-Code scannen & Beitrag online lesen

zeigt nach der Reanimation dauerhaft gravierende neurologische Folgeschäden, die v. a. die Funktionalität des Zentralnervensystems betreffen [2, 3].

Der hohen Letalität stehen europaweit pro Jahr etwa 250.000 Reanimationsbehandlungen gegenüber. Die Ergebnisse dieser Behandlungen zu verbessern, ist eine der großen medizinischen Herausforderungen unserer Zeit.

Herz-Lungen-Wiederbelebung

Die kardiopulmonale Wiederbelebung („cardiopulmonary resuscitation“, CPR) ist seit Jahrzehnten das Mittel der Wahl, um die Durchblutung des Myokards, des Gehirns und anderer Organe im Fall eines HKS aufrechtzuerhalten. Zu den Standardmethoden der CPR gehören – unabhängig von den Ursachen des kardiovaskulären Versagens – bis heute Herzdruckmassage, künstliche Beatmung, Defibrillation und die Injektion von Medikamenten.

Die Aussicht auf Erfolg im Rahmen einer CPR ist jedoch häufig gering, da sich u. a.

- a) die zugrunde liegende Ursache des HKS nicht vor Ort behandeln lässt und
- b) der Kreislauf trotz maximaler Bemühungen des Rettungsdienstes nicht spontan wieder in Gang kommt („return of spontaneous circulation“, ROSC).

In den letzten Jahren wurden deshalb umfangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt und verbesserte Rettungsketten und intensive CPR-Trainingsprogramme implementiert. Auch neue therapeutische Ansätze wie die zielgerichtete CPR („targeted CPR“, tCPR) und die extrakorporale CPR (eCPR) sollten dazu beitragen, die Prognose für reanimierte Patienten zu verbessern [4–6].

Targeted CPR

Die tCPR ist ein Konzept, für das spezifische hämodynamische, respiratorische und metabolische Ziele definiert wurden, die während der Reanimation erreicht werden sollen [4–6]. Ausschlaggebend sind hier u. a. die Kompressionstiefe der Herzdruckmassage, der arterielle Blutdruck, die endtidale CO₂-Messung und die Titration des Sauerstoffs [4, 7]. Die Erweiterung des di-

agnostischen Spektrums war ein wichtiger Schritt hin zu einer rational begründeten und kontrollierbaren Therapie. Die Umsetzung der tCPR in die Praxis erweist sich allerdings als schwierig, da außerklinisch kaum geeignete Überwachungsmaßnahmen verfügbar sind. Entsprechend limitiert sind auch die therapeutischen Optionen.

Extrakorporale CPR

Ähnliche Einschränkungen gelten für die Anwendung extrakorporaler Kreislaufunterstützungssysteme (auch bekannt als: „extracorporeal life support“, ECLS), die zunehmend zur Reanimation eingesetzt werden. Obwohl der Blutkreislauf und die Atemfunktion mit deren Hilfe schnell ersetzt werden können, mangelt es auch in diesem Umfeld an einem schnell verfügbaren Monitoring. Deshalb ist eine zielgerichtete Behandlung reanimationspflichtiger Patienten auch mit der eCPR nur sehr eingeschränkt möglich [8].

Trotzdem hat das Konzept der eCPR die Vision gefördert, dass sich die Prognose für reanimierte Patienten tatsächlich verbessern lässt. Deshalb wurde das Verfahren 2015 in Form spezifischer CPR-Algorithmen bzw. als „Alternative zur konventionellen CPR bei ausgewählten Patienten“ in die Leitlinien integriert [9, 10].

Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Erfolgsbilanz nach Reanimation mit Blick auf das Überleben tatsächlich verbessert [11]. Hinsichtlich der neurologischen Erholung erfordert der Status quo dennoch neue Ansätze und Ideen, um das therapeutische Potenzial der eCPR voll auszuschöpfen.

Ischämie-/Reperfusionsschaden

Als wesentliche Ursache des schlechten Outcome nach einem HKS ist seit Jahrzehnten der Ischämie-/Reperfusionsschaden (IRI) Gegenstand der Forschung. Nach heutigem Erkenntnisstand verursacht die abrupte Unterbrechung des Blutflusses (Ischämie) zeitabhängig eine zelluläre Schädigung, die hauptsächlich auf einen Substratmangel zurückzuführen ist [12–14].

Ischämie

Der ischämisch bedingte Sauerstoffmangel führt zu einer Dysfunktion der zellulären Ionenporter und damit zu einer eingeschränkten Osmoregulation. Die Depolarisation des Membranpotenzials bewirkt einen Kaliumausstrom, während Kalzium-, Chlorid- und Natriumionen unkontrolliert in die Zellen einströmen, wodurch verstärkt Wasser eingelagert wird. Die Ödembildung wirkt sich im Endothelgewebe der Arterien besonders fatal aus, v. a. im Gehirn, wo die Einengung des Gefäßlumens kleinerer Gefäße (z. B. der Arteriolen) zu einer weiteren Einschränkung oder zum Stillstand der Blutzirkulation führt. Abbauprodukte sammeln sich an, der zelluläre Stoffwechsel gerät zunehmend außer Kontrolle, und wichtige Zellstrukturen werden zerstört. Dauert die Ischämie länger an, sterben die Zellen ab, was letztlich nicht nur zum Tod eines Organs, sondern des ganzen Organismus führt. Insgesamt äußert sich eine ausgeprägte Ischämie in der folgenden Symptomatik:

- Energieverlust (nahezu vollständiger Abbau von ATP binnen weniger Minuten),
- metabolische Acidose,
- Zunahme des intrazellulären Wassergehalts,
- Vasoplegie mit anschließender Vasodilatation und Hypotension.

Reperfusion

Ziel der derzeit gängigen Methoden der CPR ist es, den Organismus möglichst schnell wieder mit Nährstoffen zu versorgen, sodass der Zellstoffwechsel wieder in Gang kommt. Die ischämische Zelle ist jedoch gegenüber weiteren Schädigungen extrem empfindlich, und so ist es häufig gerade die Reperfusion infolge einer Reanimation, die das Absterben der Zellen noch beschleunigt. Denn eine (unkontrollierte) Reperfusion kann in den vorgeschädigten Zellen eine Reihe von Stoffwechselprozessen triggern, die selbst schwere Zellschäden bis hin zum Zelltod verursachen. Das Ausmaß der zellulären Schädigung nimmt deshalb in der Phase der Reperfusion zunächst noch zu (■ Abb. 1).

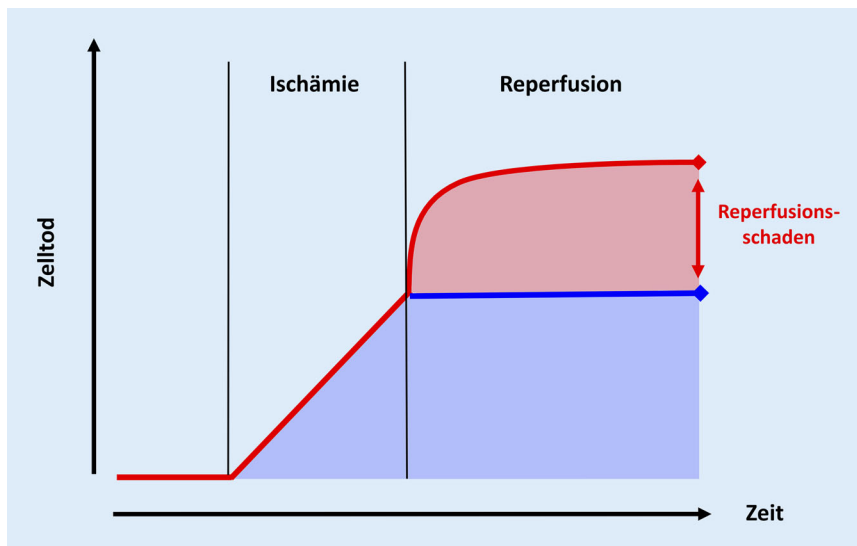


Abb. 1 ▲ Ischämie-/Reperfusionsschaden. (Modifiziert nach Garcadorado und Piper [15])

Eine wichtige Rolle spielt in dieser Reaktionskette der Sauerstoff. Um die Blutzirkulation und die Versorgung des Gewebes wieder in Gang zu setzen, wird dem Betroffenen im Falle eines akuten Herz-Kreislauf-Versagens u. a. meist auch reiner Sauerstoff zugeführt. Dadurch wird im ohnehin geschwächten Organismus die Entstehung von Sauerstoffradikalen begünstigt, die ihrerseits eine Vielzahl an Zellschäden auslösen können.

Der Reperfusionsschaden tritt innerhalb von Sekunden oder Minuten nach der Wiederherstellung des Blutflusses zum ischämischen Gewebe auf. Gegenmaßnahmen müssen entsprechend zeitnah implementiert werden.

Targeted eCPR – die CARL-Therapie

Die ischämisch induzierten pathophysiologischen Stoffwechselanpassungen nach einem akuten Herzstillstand lassen sich nicht verhindern. Es ist jedoch möglich, Gewebe und Organe auch nach längeren Ischämiezeiten zu schützen und v. a. den Reperfusionsschaden einzudämmen, wenn die Reperfusion kontrolliert durchgeführt wird [14]. Das zeigen die heute obligaten therapeutischen Verfahren in der Herzchirurgie, der Organtransplantation sowie bei der Reperfusion von Extremitäten [16–19]. Kernelemente dieser Verfahren sind:

- die Kontrolle der physikalischen Reperflu-
sionsbedingungen (Blutdruck, Blutfluss, Pulsatilität, Bluttemperatur),
- die situative Modifikation der Reperfu-
sionslösung, in der Regel des rezirkulierenden Blutes, durch Anpassung des Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalts, des pH-Werts, des Elektrolytgehalts und der Osmolarität,
- ein schnell verfügbares, umfassendes Monitoring.

Anhand dieser Vorgaben und auf der Basis einer intensiven Forschungsarbeit [20–26] wurde in den letzten 16 Jahren das Konzept der kontrollierten Ganzkörperreperfusion („controlled automated reperfusion of the whole body“, CARL) entwickelt. In deren Mittelpunkt steht die Vorbereitung des durch den Sauerstoffmangel geschädigten Gewebes auf das Wiedereinsetzen des körpereigenen Blutkreislaufs. Der Patient wird dazu über die Leistengefäße an eine extrakorporale Zirkulation angeschlossen, anschließend wird das venöse Blut mithilfe eines Oxygenators spezifisch mit Sauerstoff angereichert, patientenindividuell modifiziert und dann in den Körper zurückgepumpt.

Kontrolle der physikalischen Reperflu- sionsbedingungen

Zu den physikalischen Parametern, über die sich ein Ischämie-/Reperfusionsschaden eindämmen lässt, gehören neben dem

Reperflu-
sionsdruck der korrespondierende Reperflu-
sionsfluss und die Körpertem-
peratur. Diese 3 Größen werden im Rahmen
der CARL-Therapie, wie in Tab. 1 be-
schrieben, situativ spezifisch reguliert.

Patientenindividuelle Anpassung des Reperfusats

Die Zusammensetzung der CARL-Reperfu-
sionslösung wird mithilfe spezifisch wirk-
samer Substanzen an den Bedarf und die
Pathophysiologie des ischämischen Gewe-
bes angepasst. Das perfundierende Blut
wird dazu, wie in Tab. 2 beschrieben,
modifiziert.

Zur Wiederherstellung des Säure-Ba-
sen-Gleichgewichts wird außerdem fort-
laufend der Base Excess überwacht. Über
den Hämokrit bzw. die Hämoglobin-
konzentration werden die Sauerstoffbin-
dungskapazität und die Viskosität des
Blutes angepasst. Letzteres senkt das Ri-
siko einer Thrombenbildung während der
extrakorporalen Zirkulation.

Medikation

Die kontrollierte Ganzkörperreperfusion wird im Rahmen einer CARL-Therapie auch medi-
kamentös unterstützt. So wird das Blut
eines mit CARL behandelten Patienten un-
mittelbar mit Beginn der Therapie hepa-
rinisiert, zusätzlich unterstützt das im Pri-
ming enthaltene Zitrat die sofortige Anti-
koagulation. Eine Antikoagulation ist an-
gezeigt, weil über den Kontakt des Blutes
mit den künstlichen Oberflächen der EKZ
das Gerinnungs- und Immunsystem akti-
viert wird. Die Gerinnungsreaktion setzt in
diesem Fall schlagartig ein (Hyperkoagu-
lation); schwerwiegende pulmonale, rena-
le, neurologische und hämodynamische
Komplikationen bis hin zu Organdysfunk-
tion und Organversagen können die Fol-
ge sein. Zur Überwachung der Antiko-
agulation und zur Verhinderung von fa-
talen Komplikationen werden deshalb die
folgenden Parameter fortlaufend kontrol-
liert: aPTT, ACT, Heparinkonzentration, An-
ti-Faktor-Xa-Aktivität.

Um die Antikoagulation anzupassen
und systemimmanente Thrombenbildun-
gen zu verhindern, wird ggf. auch das
Pumpenminutenvolumen angepasst.

Tab. 1 Kontrolle der physikalischen Reperfusionbedingungen während einer CARL-Behandlung	
Parameter/Zielwert	Beschreibung/Rationale
Pulsatilität	Die Pulsation erhöht die hämodynamische Kraft zur Wiederöffnung von Kapillarstromgebieten
Blutfluss und Blutdruck	Der Perfusionsdruck während einer CARL-Therapie korrespondiert mit einem Perfusionsfluss (Pumpenminutenvolumen) und einem Blutfluss, der annähernd den Verhältnissen in einem gesunden Organismus entspricht
Hypothermie (Venöse Bluttemperatur)	Die Organschädigung nach Herz-Kreislauf-Stillstand lässt sich auch über ein Abkühlen des Körpers eindämmen, denn Kälte verlangsamt den Zellstoffwechsel, drosselt den Sauerstoffbedarf und senkt den zellulären Energieverbrauch

Tab. 2 Patientenindividuelle Anpassung des Reperfusats während einer CARL-Behandlung	
Parameter/Zielwert	Beschreibung/Rationale
Sauerstoff (p _a O ₂)	Das Patientenblut wird mit einem Luftgemisch aus Atemluft und Sauerstoff (Sauerstoffgehalt 21–100 %) angereichert, um die Bildung von Sauerstoffradikalen zu limitieren (normoxische Reperusionsstrategie)
Kohlendioxid (p _a CO ₂)	Die CARL-Therapie setzt initial auf eine vorsichtige, über den CO ₂ -Gehalt gesteuerte Blutpufferung (pH-stat-Strategie), da der sofortige Ausgleich der Übersäuerung (z. B. durch Puffer) den ohnehin gestörten Zellstoffwechsel weiter überlasten würde. Im Verlauf einer milden Acidose können die Zellen dagegen schrittweise Substrate aufnehmen (reduzierte metabolische Aktivität in der Phase des Substratmangels) und Voraussetzungen für Reparaturprozesse schaffen
Osmolarität im Blutserum	Das Blut wird in der ersten Phase der CARL-Therapie mithilfe osmoaktiver Substanzen (Natrium, Humanalbumin, Mannitol) auf einen hyperosmolaren Wert gebracht. Dieser Ansatz wirkt der Bildung von Hirnödemen entgegen, indem er die Wasserbindekapazität des Blutes erhöht. Dem Zellgewebe wird infolgedessen Wasser entzogen, was das Abschwellen der Gefäßendothelien begünstigt
Kalium	Um den Sinusrhythmus wiederherzustellen und den Sauerstoffverbrauch im Myokard zu minimieren, wird das Herz ggf. vorübergehend mithilfe einer Kaliumlösung pharmakologisch stillgestellt (sekundäre Kardioplegie)
Kalzium (ionisiertes Kalzium)	Der unkontrollierte Kalziumeinstrom in die ischämische Zelle befördert die Bildung von Hirnödemen, deshalb wird der Kalziumgehalt zu Beginn der CARL-Therapie mithilfe von Zitrat abgesenkt
Natrium	Der ischämie-/reperusionsbedingt unphysiologische Gehalt an Natriumionen in der Zelle und im Gewebe begünstigt die Ausbildung von Ödemen. Zur Eindämmung des Ischämie-/Reperfusionsschadens werden deshalb Natriumionen in Form von Kochsalzlösung zugeführt
Arterieller pH-Wert	Die pH-stat-Strategie dient der Reduktion der metabolischen Aktivität während des Substratdefizits

Als Antiarrhythmika und zur Neuroprotektion werden dem Reperfusat Magnesium und Lidocain zugesetzt. Das Magnesium dient dem zusätzlichen Schutz der Mitochondrien.

Inotrope Substanzen wie Suprarenin o. Ä., die die Kontraktionskraft des Herzens beeinflussen, werden in der Frühphase der CARL-Therapie (innerhalb der ersten 30 min) möglichst nicht eingesetzt.

Fortlaufendes Monitoring

Die kontinuierliche Überwachung aller behandlungsrelevanten Parameter und die

Möglichkeit, diese adäquat und schnell anzupassen, sind essenzielle Voraussetzungen für die erfolgreiche Versorgung akut und kritisch kranker Patienten. Daher wurden für die CARL-Therapie der Umfang und die Anforderungen an ein geeignetes Monitoring und an eine patientenindividuelle Steuerung der physikalischen und biochemischen Reperfusionbedingungen anhand der Funktionalitäten einer Herz-Lunge-Maschine neu definiert. Folgerichtig wurden u. a. eine kontinuierliche venöse und arterielle Blutgasanalyse (BGA) und eine arterielle Blutdrucküberwachung in das CARL-Setting implementiert.

Das CARL-System

Um die CARL-Therapie umsetzen zu können, musste ein neues Gerätesystem entwickelt werden, dessen funktionales Spektrum sowohl ein umfangreiches und schnell verfügbares Monitoring als auch eine präzise Steuerung der physikalischen und biochemischen Reperfusionbedingungen ermöglicht. Da ein solches Gerät bisher nicht verfügbar war, wurde zur ersten Anwendung von CARL bei Patienten mit akutem HKS und anschließender verlängerter CPR die Systemkonfiguration CIRD 1.0 (Controlled Integrated Resuscitation Device 1.0; **Abb. 2**) entwickelt und zugelassen. Diese Konfiguration, die nur für den innerklinischen Einsatz vorgesehen war, basierte auf einer erweiterten ECLS, die u. a. ein Online-Blutgas-Monitoring, eine kontrollierte Sauerstoffzufuhr, das Anlegen eines hohen und pulsierenden Blutflusses und eine entsprechende Kühlvorrichtung zur Induktion einer Hypothermie umfasste.

Die Systemfügung CIRD 1.0 war der Vorläufer des heutigen, CE-zertifizierten CARL-Systems (Resuscitec GmbH, Freiburg; **Abb. 2**), dessen tragbare Hauptkomponenten sowohl für den innerklinischen als auch speziell für den außerklinischen Einsatz entwickelt wurden.

Das System besteht aus einer zentralen Kontroll- und Steuereinheit (CARL Controller), an die der Patient über die Leistungsfäße angeschlossen wird. Dazu kommen ein Sauerstoffkontrollgerät (CARL MOX) und eine Versorgungseinheit zur Applikation einer therapeutischen Hypothermie (CARL Cooler). Die 3 Hauptkomponenten des CARL-Systems entsprechen den Anforderungen der CARL-Therapie im Umfeld einer OHCA u. a. durch die folgenden Leistungsmerkmale:

- mobiles Doppelpumpenkontrollsystem zur Erzeugung eines hohen, pulsatilen Blutflusses,
- arterielle Blutgasanalyse,
- Plug-in-Fiberoptikkatheter zur Messung des intraarteriellen Blutdrucks,
- schneller Systemstart mit einem vorgefertigten Perfusionsset mit integriertem Druck-, S_vO₂- und Temperatursensor,
- spezielle Priming-Lösung,



Abb. 2 ◀ a CIRD 1.0, b CARL-System. (Mit freundl. Genehmigung von ©Resuscitec GmbH, Freiburg. Alle Rechte vorbehalten.)

- mobiles Sauerstoffkontrollgerät mit Blower-Technologie,
- mobiles Hypothermiegerät zum schnellen Abkühlen des Patienten,
- Transportausrüstung für alle Komponenten.

Die erweiterten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten der CARL-Systematik sind im Vergleich zu den derzeit gängigen Methoden der kardiopulmonalen Wiederbelebung in **Tab. 3** zusammengefasst.

Studienlage

Prälinik

Das CARL-Gesamtkonzept und seine einzelnen Komponenten wurden zunächst in zahlreichen chronischen Tierversuchen getestet und weiterentwickelt [20–27]. Das entsprechende Großtiermodell wurde etabliert, um die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Reperfusion nach schwerer Ischämie mit Blick auf die Endpunkte Letalität und neurologische Erholung zu untersuchen [23]. Die Tiere wurden dafür für 15 min bzw. 20 min ungeschützt und ohne jeden Versuch der Wiederbelebung einer warmen Ischämie ausgesetzt [20, 23, 24]. In der anschließenden Reperusionsperiode von 60 min wurden die Reperusionsbedingungen und das zirkulierende Blut entsprechend den im Rahmen einer Tieroperation kontinuierlich verfügbaren Messparametern adaptiert. Je nach untersuchter

Variable überlebten bis zu 90 % der Tiere den Versuchsverlauf, davon zeigten wiederum 90 % eine vollständige neurologische Erholung [20, 23–26]. Anhand der Zusammenschau aller bekannten Publikationen zur Reperfusion einzelner Organe sowie der Ergebnisse der beschriebenen Tierversuche war es möglich, für die CARL-Therapie eine Reihe von zielführenden Behandlungseckpunkten zu definieren.

Anwendungsbeobachtung

Die beschriebenen Elemente einer kontrollierten Reperfusion des ganzen Körpers wurden am Universitätsklinikum Freiburg in einer krankenhausbasierten Standardarbeitsanweisung (SOP) zusammengefasst. Dieses Dokument bietet in der hochgradig interaktiven Situation einer fortgesetzten CPR, in der ein Bedarf an extrakorporaler Unterstützung auftritt, eine Anleitung für alle Mitglieder des behandelnden Teams.

Auf dieser Grundlage wurden am Universitätsklinikum Freiburg im Rahmen einer Anwendungsbeobachtung in einer unkontrollierten, konsekutiven Serie $n=14$ Patienten mit CARL behandelt (DRKS00005773) [28]. In allen Fällen ereignete sich der HKS außerhalb einer Klinik im Beisein von Zeugen, und die CPR wurde sofort eingeleitet. Die interdisziplinären Teams entschieden sich jeweils erst nach einer verlängerten CPR bis zu 2 h für die Anwendung der CARL-Therapie. Alle Patienten wurden in der Folge gut überwacht und gemäß den genannten

Vorgaben behandelt. Die Ergebnisse dieser Behandlungsserie stimmten mit den Erkenntnissen aus den präklinischen Experimenten überein: Trotz der z.T. extrem langen vorangegangenen CPR-Periode (zwischen 51 und 120 min) überlebten 7/14 Patienten und erlangten das volle Bewusstsein wieder. Dabei konnten 6/7 der Cerebral Performance Class (CPC) „1“ zugeordnet werden. Eine vollständige zerebrale Erholung zeigte auch die Patientin mit der längsten Vorlaufzeit (120 min CPR), die trotz einer verbleibenden Parese der Beine aufgrund eines A.-spinalis-anterior-Syndroms heute wieder in ihrem Beruf arbeitet [29].

PMCF-Studie

Das CARL-System wird derzeit in einer „Post-market-clinical-follow-up“-Studie (PMCF-Studie) in mehreren deutschen und europäischen Kliniken getestet (DRKS00018967). Die Rekrutierung für diese Studie wurde jedoch durch die SARS-CoV-2-Pandemie verzögert und wird voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein.

Fazit für die Praxis

- Die Ergebnisse im Bereich der Reanimation sind seit Jahrzehnten gleichbleibend unbefriedigend.
- Europaweit überleben nur rund 8 % einen OHCA.

Option	CARL	eCPR	CPR
Venoarterielle Perfusion und Oxygenierung	✓	✓	(✓)
Hoher arterieller Perfusionsdruck	✓	–	–
Pulsatiler arterieller Blutfluss	✓	–	–
Hoher arterieller Blutfluss	✓	–	–
Sofortige Hypothermie	✓	–	–
Kontinuierliche BGA (venös und arteriell)	✓	–	–
Kontrollierte Oxygenierung	✓	–	–
Hypokalzämie	✓	–	–
Hyperkaliämie	✓	–	–
Hyperosmolarität	✓	–	–

- Der seltene Überlebensfall geht häufig mit schweren neurologischen Schäden, v. a. im Zentralnervensystem, einher.
- Die CARL-Therapie adressiert den Ischämie-/Reperfusionsschaden, der nach neueren Erkenntnissen für die schlechten Ergebnisse nach Reanimation mitverantwortlich ist.
- Kernelemente des neuen Verfahrens sind die kontinuierliche Überwachung und patientenindividuelle Modifikation relevanter Parameter, eine kontrollierte Sauerstoffzufuhr und die Induktion einer therapeutischen Hypothermie.

Danksagung. Besonderer Dank gebührt Frau Dr. Christina Süßlin, die die Autoren bei der Erstellung und Überarbeitung des Manuskripts umfassend unterstützt hat.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. C. Benk, G. Trummer, J.-S. Pooth und F. Beyersdorf sind Gründer und Anteilseigner der Resuscitec GmbH. C. Benk, G. Trummer, J.-S. Pooth und C. Scherer sind in Teilzeit bei der Resuscitec GmbH beschäftigt.

Alle nationalen Richtlinien zur Haltung und zum Umgang mit Labortieren wurden eingehalten, und die notwendigen Zustimmungen der zuständigen Behörden liegen vor. Alle beschriebenen Untersuchungen am Menschen oder an menschlichem Gewebe wurden mit Zustimmung der zuständigen Ethikkommission, im Einklang mit nationalem Recht sowie gemäß der Deklaration von Helsinki von 1975 (in der aktuellen, überarbeiteten Fassung) durchgeführt. Von allen beteiligten Patient/-innen liegt eine Einverständniserklärung vor.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/ die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

- Gräsner J-T, Herlitz J, Tjelmeland IBM, Wnent J, Masterson S, Lilja Get al (2021) European Resuscitation Council guidelines 2021: Epidemiology of cardiac arrest in Europe. Resuscitation 161:61–79. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.007>
- Moulaert VRMP, Verbunt JA, van Heugten CM, Wade DT (2009) Cognitive impairments in survivors of out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review. Resuscitation 80:297–305. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2008.10.034>
- Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP et al (2020) Heart disease and stroke statistics-2020 update: a report from the American Heart Association. Circulation 141:e139–e596. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000757>
- Maciel CB, Barden MM, Greer DM (2017) Neurologic recovery after cardiac arrest: a multifaceted puzzle requiring comprehensive coordinated care. Curr Treat Options Cardiovasc Med 19:52. <https://doi.org/10.1007/s11936-017-0548-0>
- Friess SH, Sutton RM, French B, Bhalala U, Maltese MR, Naim MY et al (2014) Hemodynamic directed CPR improves cerebral perfusion pressure and brain tissue oxygenation. Resuscitation 85:1298–1303. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.05.040>
- Kleinman ME, Perkins GD, Bhanji F, Billi JE, Bray JE, Callaway CW et al (2018) ILCOR scientific knowledge gaps and clinical research priorities for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care: a consensus statement. Circulation 137:e802–e819. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000561>
- Sutton RM, Friess SH, Naim MY, Lampe JW, Bratinov G, Weiland TR et al (2014) Patient-centric blood pressure-targeted cardiopulmonary resuscitation improves survival from cardiac arrest. Am J Respir Crit Care Med 190:1255–1262. <https://doi.org/10.1164/rccm.201407-1343OC>
- Nunes LB, Mendes PV, Hirota AS, Barbosa EV, Maciel AT, Schettino GPP et al (2014) Severe hypoxemia during veno-venous extracorporeal membrane oxygenation: exploring the limits of extracorporeal respiratory support. Clin Sao Paulo Braz 69:173–178. [https://doi.org/10.6061/clinics/2014\(03\)05](https://doi.org/10.6061/clinics/2014(03)05)
- Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P et al (2015) European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: Section 3. Adult Adv Life Support Resusc 95:100–147. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.016>
- Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djävär T et al (2021) European Resuscitation Council guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010>
- Yannopoulos D, Bartos J, Raveendran G, Walser E, Connert J, Murray TA et al (2020) Advanced reperfusion strategies for patients with out-of-hospital cardiac arrest and refractory ventricular fibrillation (ARREST): a phase 2, single centre, open-label, randomised controlled trial. Lancet 396:1807–1816. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32338-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32338-2)
- Garciaorado D, Rodriguezsinovas A, Ruizmeana M, Inserte J, Agullo L, Cabestrero A (2006) The end-effectors of preconditioning protection against myocardial cell death secondary to ischemia-reperfusion. Cardiovasc Res 70:274–285. <https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2006.02.011>

Korrespondenzadresse



Prof. Dr.-Ing. C Benk
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie,
Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg, Deutschland
christoph.benk@uniklinik-freiburg.de

Prof. Dr.-Ing. C Benk ist promovierter Dipl.-Ingenieur und seit vielen Jahren kardiotechnischer Bereichsleiter in der Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie am Universitäts-Herzzentrum des Universitätsklinikums Freiburg. Schwerpunkte seiner Arbeit sind extrakorporale Verfahren, Kunstherzsysteme und Systeme zur akuten Herz- bzw. Lungenunterstützung. Des Weiteren betreibt er intensive Forschungstätigkeiten im Bereich Strömungsanalysen in Herzunterstützungssystemen sowie der kontrollierten Ganzkörperreperfusion nach Herzstillstand. Seit Juli 2015 ist er Honorarprofessor an der Hochschule Furtwangen

13. Wu M-Y, Yang G-T, Liao W-T, Tsai AP-Y, Cheng Y-L, Cheng P-W et al (2018) Current mechanistic concepts in ischemia and reperfusion injury. *Cell Physiol Biochem* 46:1650–1667. <https://doi.org/10.1159/000489241>
14. Daniele SG, Trummer G, Hossmann KA, Vrselja Z, Benk C, Gobeske KT et al (2021) Brain vulnerability and viability after ischaemia. *Nat Rev Neurosci*. <https://doi.org/10.1038/s41583-021-00488-y>
15. Garciaorado D, Piper H (2006) Postconditioning: Reperfusion of "reperfusion injury" after hibernation. *Cardiovasc Res* 69:1–3. <https://doi.org/10.1016/j.cardiores.2005.11.011>
16. Buckberg GD (1986) When is cardiac muscle damaged irreversibly? *J Thorac Cardiovasc Surg* 92:483–487
17. Haab F, Julia P, Nochy D, Cambillau M, Fabiani JN, Thibault P (1996) Improvement of postischemic renal function by limitation of initial reperfusion pressure. *J Urol* 155:1089–1093
18. Beyersdorf F, Unger A, Wildhirt A, Kretzer U, Deuschländer N, Krüger S et al (1991) Studies of reperfusion injury in skeletal muscle: preserved cellular viability after extended periods of warm ischemia. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 32:664–676
19. Halldorsson A, Kronon M, Allen BS, Bolling KS, Wang T, Rahman S et al (1998) Controlled reperfusion after lung ischemia: implications for improved function after lung transplantation. *J Thorac Cardiovasc Surg* 115:415–424. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(98\)70286-7](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(98)70286-7) (discussion 424–425)
20. Foerster K, Benk C, Beyersdorf F, Cristina Schmitz H, Wittmann K, Taunyane I et al (2017) Twenty minutes of normothermic cardiac arrest in a pig model: the role of short-term hypothermia for neurological outcome. *Perfusion*. <https://doi.org/10.1177/0267659117742478>
21. Kreibich M, Trummer G, Beyersdorf F, Scherer C, Förster K, Taunyane I et al (2018) Improved outcome in an animal model of prolonged cardiac arrest through pulsatile high pressure controlled automated Reperfusion of the whole body. *Artif Organs* 42:992–1000. <https://doi.org/10.1111/aor.13147>
22. Liakopoulos OJ, Hristov N, Buckberg GD, Triana J, Trummer G, Allen BS (2011) Resuscitation after prolonged cardiac arrest: effects of cardiopulmonary bypass and sodium-hydrogen exchange inhibition on myocardial and neurological recovery. *Eur J Cardiothorac Surg* 40:978–984. <https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2011.02.002>
23. Trummer G, Foerster K, Buckberg GD, Benk C, Heilmann C, Mader I et al (2010) Successful resuscitation after prolonged periods of cardiac arrest: A new field in cardiac surgery. *J Thorac Cardiovasc Surg* 139:1325–1332.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2009.08.046>
24. Taunyane IC, Benk C, Beyersdorf F, Foerster K, Cristina Schmitz H, Wittmann K et al (2016) Preserved brain morphology after controlled automated reperfusion of the whole body following normothermic circulatory arrest time of up to 20 minutes. *Eur J Cardiothorac Surg* 50:1025–1034. <https://doi.org/10.1093/ejcts/ezw186>
25. Foerster K, D'Inka M, Beyersdorf F, Benk C, Nguyen-Thanh T, Mader I et al (2013) Prolonged cardiac arrest and resuscitation by extracorporeal life support: favourable outcome without preceding anticoagulation in an experimental setting. *Perfusion* 28:520–528
26. Trummer G, Foerster K, Buckberg GD, Benk C, Mader I, Heilmann C et al (2014) Superior neurologic

CARL—Controlled reperfusion of the whole body. From cardiopulmonary resuscitation to targeted eCPR

Background: The incidence and mortality of acute cardiovascular arrest have been consistently high for decades.

Objective: How to improve the currently unsatisfactory outcome after resuscitation regarding survival and neurological, especially cerebral, sequelae?

Material and methods: Development of a therapeutic approach to curtail ischemia/reperfusion injury in an animal model. Development of a device system optimized for resuscitation that can be used to implement controlled reperfusion of the whole body outside the hospital.

Results: Establishment of CARL treatment in the clinic and in the treatment of OHCA patients. Transfer of the CARL treatment and system in a clinical observational study. First case reports in which patients survived OHCA without brain damage even after ischemia times up to 2 h.

Conclusion: CARL treatment is potentially suitable to treat patients suffering from cardiovascular arrest refractory to treatment even for prolonged periods.

Keywords

Resuscitation · Reperfusion · CPR · Ischemia/reperfusion injury · Extracorporeal circulation

recovery after 15 minutes of normothermic cardiac arrest using an extracorporeal life support system for optimized blood pressure and flow. *Perfusion* 29:130–138

27. Allen BS, Castellá M, Buckberg GD, Tan Z (2003) Conditioned blood reperfusion markedly enhances neurologic recovery after prolonged cerebral ischemia. *J Thorac Cardiovasc Surg* 126:1851–1858. [https://doi.org/10.1016/S0022-5223\(03\)00226-7](https://doi.org/10.1016/S0022-5223(03)00226-7)
28. Trummer G, Benk C, Beyersdorf F (2019) Controlled automated reperfusion of the whole body after cardiac arrest. *J Thorac Dis* 11:1464–1470. <https://doi.org/10.21037/jtd.2019.04.05>
29. Trummer G, Supady A, Beyersdorf F, Scherer C, Wengenmayer T, Umhau M et al (2017) Controlled automated reperfusion of the whole body after 120 minutes of Cardiopulmonary resuscitation: first clinical report. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med* 25:66. <https://doi.org/10.1186/s13049-017-0412-y>